

NÁVOD K POUŽITÍ

GIO-ELEKTROSTIMULACE NÁSTROJ

Elektrostimulační přístroj



Vážený kliente

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Abyste dosáhli nejlepších možností zařízení a zajistili jeho bezpečný provoz, přečtěte si před použitím tento návod k použití. Uchovejte si prosím tyto pokyny pro referenci.

Vstup	3
Funkce a léčebné účinky	3
Kontrolní panel	4
Postup	5 - 7
Uživatelský manuál	8
Návrh na hubnoucí kúru	8
Průběh procedury	9 - 12
Kontraindikace	13
Seznam příslušenství	13
Důležité bezpečnostní pokyny	14
Technická data	14
Problémy a způsoby postupu	15
Záruční list	16

Zařízení na tvarování postavy dokáže účinně odstranit přebytečnou tukovou tkáň. Umožňuje rychlé hubnutí díky lokální svalové stimulaci. Jedná se o moderní způsob hubnutí. Použití přístroje umožňuje udržet si dokonalou postavu po zhubnutí nadváhy. Přístroj je vybaven frekvenčním snímacím obvodem a mikropočítačovým systémem, který stimuluje biologickou elektřinu a vytváří podmínky podobné akupunktuře podobné těm, které se používají v tradiční čínské medicíně. To umožňuje pravidelnou a hlubokou svalovou stimulaci a masáž svalové tkáně. Dochází tak k lepšímu proudění lymfy, odvodu toxinů, zlepšení mikrocirkulace v těle, zrychlení metabolismu, posílení odolnosti organismu vůči nemocem a především odstranění značného množství tukových buněk a zpevnění pokožky.

FUNKCE A TERAPEUTICKÉ PŮSOBNÍ

Ztráta váhy:

- 10 dní jako standardní doba léčby - možnost zhubnout 1-8 kilo gramů

Hubnutí těla:

- 10 dní jako standardní doba léčby - zeštíhlení pasu o 2-9 centimetry

Zpevnění prsou:


- 21 terapie – zpevnění prsou


Aplikace:


- hubnutí, zeštíhlení postavy, zpevnění a zpevnění prsou ne svaly.

Frekvence ošetření:


- nízká frekvence v případě potřeby ztráty kilogramů a střední frekvence pro zpevnění pokožky.

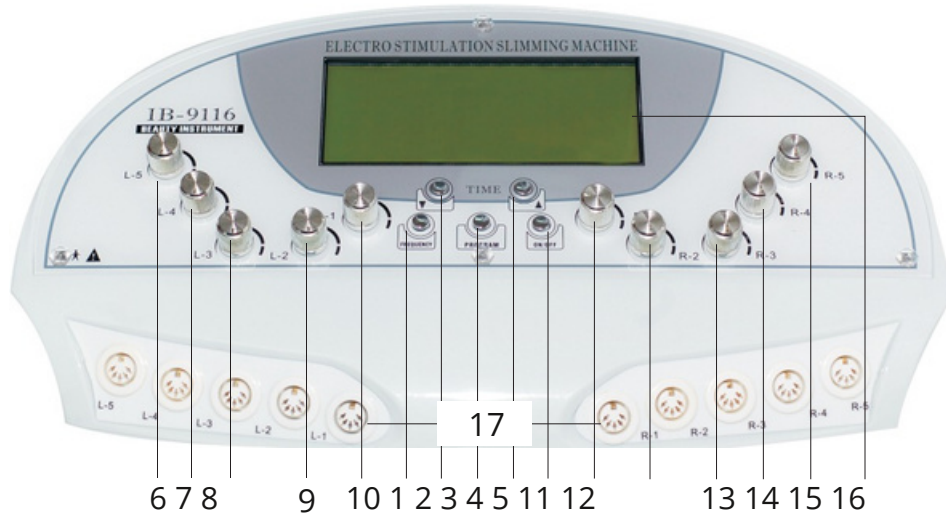

1. Nastavení frekvence 
2. Regulace pracovní doby (zkrácení)
3. Výběr programu (1-9)
4. Úprava pracovní doby (zvýšení)
5. Napájení (zapnout/vypnout)
- 6-15. Nastavení intenzity frekvence 16. LCD displej
17. Zásuvky pro elektrostimulaci

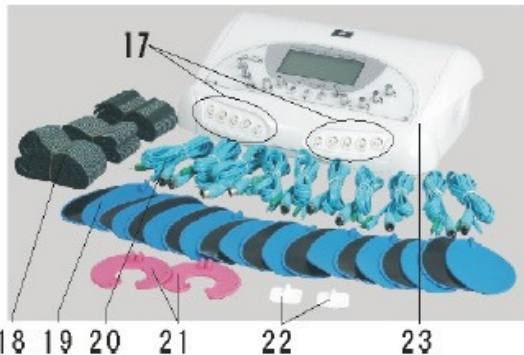

18. Pružný pásek
19. Elektrostimulační náplast
20. Kabel pro připojení patche
21. Vycpávky hrudníku
22. Samolepicí náplast
23. Zařízení

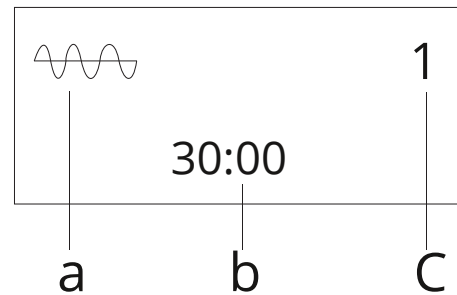

- a. Zobrazení frekvence
- b. Zobrazení času
- c. Zobrazení programu

✓ Program 1:

Nízká frekvence (povrchová vrstva) - biologická lipolytická stimulace - na

Funkce:

Biologická lipolytická stimulace působí přímo na tukové buňky, což snižuje jejich objem.

Aplikace:

Lze použít na jakoukoli část těla, zejména v případě lokálních obezita.

✓ Program 2:

Aktivní (hluboká) biologická stimulace umožňující úbytek tuku

Funkce:

Tento typ stimulace prostřednictvím svalových kontrakcí způsobuje zvýšení kreativity, ny ve svalové tkáni a následně zvýšení její síly a pružnosti. Tato reakce ovlivňuje úbytek tuku uloženého v těle.

Aplikace:

Používejte na hluboký tuk.

✓ Program 3:

Biologická stimulace na hluboké úrovni - umožňující spalování a zpevnění těla

Funkce:

Délka a frekvence impulsů při této stimulaci jsou mnohem vyšší než v obou výše uvedených programech, která intenzivně stimuluje svalová vlákna a lépe odstraňuje hluboké vrstvy tuku uložené v těle.

Aplikace:

Vynikající výsledky v boji proti celulitidě.

✓ Program 4:

Aktivační (zpevňující) biologická stimulace

Funkce:

Tento typ stimulace umožňuje urychlit metabolismus buněk. Jednáním čnejen na tukovou tkáň, ale také na kůži, čímž je pružnější a zpevnění.

Aplikace:

Používejte na ochablou pokožku.

✓ Program 5:

Biologická stimulace umožňuje svalům stát se pružnějšími

Funkce:

Délka a frekvence vysílaných impulsů při této stimulaci jsou velké vyšší než u programu 3, který posiluje svalová vlákna a zlepšuje jejich sílu kontrakce. Práce silných a pružných svalů účinněji odstraňuje hluboké vrstvy tuk uložený v těle.

Aplikace:

Vynikající výsledky v boji proti celulitidě.

✓ Program 6:

Nepřetržitá hluboká biologická stimulace vedoucí ke snížení hmotnosti (detoxikace hoření a spalování)

Funkce:

Jedná se o středně frekvenční stimulaci umožňující nepřetržitou stimulaci hluboké svaly pro rozšíření lymfatických cév a zlepšení krevního oběhu lymfa, která umožňuje odstraňovat mastné kyseliny a toxiny z buněk.

Aplikace:

Použití při poruchách oběhu lymfy, obezitě s cystami. Perfektní detoxikační účinek.

✓ Program 7:

Biologická stimulace přerušovanými vlnami (zlepšení vzhledu prsou a boků)

Funkce:

Tento typ stimulace je podobný programu 4; rozdíl je v tom, že u tohoto programu jsou vlny přerušované, spalování tukové tkáně je tedy mírné a rozvoj svalové hmoty intenzivní. **Aplikace:**

Zpevnění stavby těla, zpevnění prsou, zpevnění plochých hýždí.

✓ Program 8:

Biologická stimulace se sinusovou vlnovou modulací a průměrnou frekvencí

Funkce:

Tento typ stimulace pomáhá zlepšit buněčnou propustnost, urychluje vnitrobuněčnou výměnu látek, což způsobuje rozšíření lymfatických cév a zlepšení cirkulace lymfy za účelem odstranění mastných kyselin a vnitřních toxinů a zvýšení pružnosti svalů. **Aplikace:**

Používejte na povislá prsa, hýždě a pokožku a pro detoxikaci.

✓ Program 9:

Přehrání programů 1 až 8.

1. Nastavte každé tlačítko na 0.
2. Zkontrolujte a připojte napájení podle obrázku 1. Poté zapněte knoflík



fotografie Č.1

3. Stiskněte tlačítko 
4. Stiskněte tlačítko programovacího režimu  a vyberte program. (Existuje 9 typů)
5. Nastavte dobu běhu úpravou tlačítek času. 
6. Nastavte intenzitu výkonu otáčením knoflíků 6 - 15 (zobrazeno na panelu)



7. Pokud potřebujete během provozu posunout tlačítko funkce, času nebo intenzity, jednoduše stiskněte příslušné tlačítko a operace se nezastaví.

NÁVRH ZEHLUBOVACÍ kúry

Zeštíhlující, celulitidní a zpevňující ošetření s použitím kosmetiky z řady Drena-Cell od MayStar:

Rozpusťte 1 uzávěr tonika Drena Cell Criotherapy ve dvou uzávěrech vlažné vody a poté v roztoku důkladně navlhčete elastický obvaz. Anticelulitidový koncentrát vmasírujte silně drenážním drénem Cell Action Anti-Hellulite Concentrate 10 x 10 ml a tělo omotejte mokřým obvazem s mokřým obvazem s mokřým obvazem odspodu nahoru až k němu, pro masáž zvoleného pohybu. Protože tonikum má silný hypotermický účinek, který urychluje lymfodrenáž. Klienta je dobré přikrýt kosmetickou dekou nebo termo dekou. Ošetření zakončete vmasírováním krému.

NÁVRH ZEHLUBOVACÍ kúry

hřejivý krém Drena Cell Anti-cellulite Cream 500 ml, který působí přímo na molekuly tuku a hydrolyzou je rozkládá, regeneruje buňky, napíná pokožku a stimuluje syntézu kolagenu.

Jedno takto provedené ošetření zaručuje úbytek 1 až 5 cm obvodu těla.

Pro udržení a zvýšení účinků doporučujeme Drena Cell Gel MayStar, přípravek obsahující nejnovější kofein-fosfolipidový komplex s lipolytickým účinkem určený pro každodenní domácí péči, a náplasti proti celulitidě Drena Cell, které ovlivňují buněčný metabolismus a způsobují postupné hubnutí (aplikujte na vybranou oblast čisté a suché pokožky naneste jednu náplast, nechte ji osm hodin a poté ji odstraňte, nepoužívejte dvě náplasti najednou).

Celá série by měla obsahovat alespoň 6-10 ošetření.

POSTUP OŠETŘENÍ

1. Připojte elektrody k části těla následovně:

Obrázek 1: Krk a ramena.



Funkce: Stimulace krevního oběhu v oblasti krku a ramen, která zrychluje metabolismus a odstraňuje známky únavy.

Obrázek 2: Krk, ramena a paže.



Funkce: Stimulace krevního oběhu v oblasti krku, ramen a paží. Zlepšení metabolismus tukové tkáně.

Obrázek 3:Prsa




Funkce:Stimulace krevního oběhu v prsou. Stimulace růstu svalů prsa, aniž by došlo ke snížení tukové tkáně.

Obrázek 4:Břicho



Funkce:Stimulace krevního oběhu v břišní oblasti, redukce tkáně elasticita tuků a svalů.

Obrázek 5:Zadní

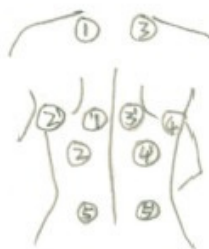

Funkce:Stimulace krevního oběhu v zádech a elasticita svalů záda, což vám umožní odstranit přebytečný tuk a zmírnit únavu.

Obrázek 6:Boky



Funkce:Stimulace krevního oběhu v bocích, což vám umožní odstranit přebytek tuk a posilují svaly.

Obrázek 7:Zbraně



Funkce:Stimulace krevního oběhu v pažích, která pomáhá posilovat svaly ne a odstraňte přebytečný tuk

Obrázek 8:Nohy



Funkce:Stimulace oběhu v dolních končetinách, posílení svalů dolních končetin a odstranění přebytečného tuku.

2. Zapněte napájení  a vyberte vhodný program:

- q Používejte na jakoukoli část těla, zejména v případě lokální obezity.
- q Používejte na hluboko uložené tukové tkáně
Používejte na celulitidu.
- q Používejte na ochablou pokožku. Použití na celulitidu.
- q Použití při poruchách oběhu lymfy, obezitě s cystami.
- q Používejte na rozšíření těla, zpevnění prsou a na povislou pokožku.
- q Používejte na povislá prsa, hýždě a pokožku.

3. Nastavte čas stisknutím tlačítka pro úpravu času (0-60 minut).

Hubnutí: 30-40 minut 15 ošetření maximálně každé 2 dny

Péče o prsa: 20-30 minut denně (15-30 ošetření)



4. Intenzitu nastavte podle pocitů klienta.

Vyberte jeden ze čtyř frekvenčních režimů.



5. Během ošetření můžete libovolně upravovat funkci, čas a intenzitu.

6. Vhodná intenzita: Vzhledem k tomu, že reakce na proudění je individuální, měla by být intenzita proudu aplikována individuálně na každého klienta. Existují tři individuální rozsahy tolerance:

Citlivý rozsah I: jemný pocit proudění II rozsah kontrakce:

Svaly se začínají stahovat

III toleranční rozsah: Horní toleranční mez intenzity proudového toku.

ČÁST TĚLA	SPRÁVNÁ DÁVKA
Krk a ramena	Senzorický limit Mez
Nohy	smrštění, mez tolerance Mez
Zbraně	smrštění, mez tolerance Mez
Břicho	smrštění, mez tolerance
Prsa	Limit smrštění
Zadní	Mez smrštění, mez tolerance
Boky	Mez smrštění, mez tolerance

7. Po ošetření zkontrolujte, zda je čas zobrazený na displeji 0, a vypněte tlačítka.

8. Po každém ošetření vyčistěte a sterilizujte elektrody. **Pozornost:**

- ✓ Nenastavujte příliš vysokou intenzitu.
- ✓ V případě zeštíhlující kúry by měla být intenzita přizpůsobena pocitům klienta.
- ✓ V případě ošetření prsou zvolte nízkou intenzitu. Kůže v místě, kam bude
- ✓ elektroda přiložena, by měla být čistá a intenzita by měla být 0
- ✓ Kůže by měla být pokryta látkou, která vede elektrické vlny. Měl by být rozetřen rovnoměrně a pokrývat celý povrch ošetření.
- ✓ V případě kožních problémů by měl být počet ošetření omezen. V
- ✓ průběhu ošetření přizpůsobujeme intenzitu pocitům klienta.

- q Nemoci oběhového systému
- q Kožní onemocnění (virové, bakteriální, plísňové)
- q Srdeční choroba
- q
- q Kovové implantáty v těle
- q Těhotenství
- q Rakovina a pseudorakovinové stavy
- q Spastická paralýza
- q Zařízení není vhodné pro použití osobami (včetně dětí) s omezeným fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek poskytování odpovídajících zkušeností a znalostí, pokud nejsou adekvátní osoba odpovědná za bezpečnost byla proškolená v používání zařízení bezpečnost.
- qZajistěte, aby si se zařízením nehrály děti.

název	Jednotka	Množství	Komentáře
Hlavní tělo	soubo	1	
Patch propojovací kabel	r	10	
Patch na hrudi	pás ks	2	
Elektrostimulační náplasti	ks ks	20	
Samolepicí náplast	ks pás	2 1	
Napájecí kabel	soubo	0 0	
Gumička	r	1	
Pojistka	ks		
Uživatelský manuál			

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY

1. Prosím nerozebírejte zařízení ani se jej nepokoušejte používat v jiném k jiným účelům, než jsou uvedeny v této uživatelské příručce. Jakékoli opravy - musí provádět oprávněný personál.
2. Nerozebírejte a neprovozujte zařízení ve vlhkém prostředí míst nebo mokřýma rukama. Na zařízení nelijte tekutiny. 3. V následujících situacích vytáhněte zástrčku ze zásuvky a poté kontaktujte odborný servis: a) zařízení bylo v kontaktu s kapalinou, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává hlasité a intenzivní zvuky, c) byl kabel poškozen, d) spotřebič se převrátil nebo rozbil.
4. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neumísťujte zařízení zde v místech, kde může někdo šlápnout na kabel.
5. Do zásuvky na zařízení nic nezasunujte. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud do ní vnikne cizí předmět odpadky do zařízení, neodstraňujte předmět sami, okamžitě kontaktujte prosím distributora nebo naši společnost.
6. Nepokládejte zařízení na nestabilní povrch a chraňte jej proti převrácení a poškození.
7. Naše společnost si vyhrazuje právo upravit informace uvedené na začátku. koláč bez předchozího upozornění zákazníka.

TECHNICKÁ DATA

Střídavé napětí 220-240V

Frekvence: 50-60 Hz

Výkon: 40W

Vnější rozměry balení: 55 x 38 x 20 cm

Hrubá hmotnost: 5 kg

PROBLÉMY A ZPŮSOBY JEDNÁNÍ

PROBLÉM	POSTUP
Zařízení nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí2. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky a zařízení.3. Zkontrolujte, zda je přepínač nastaven do polohy 1.3. Zkontrolujte, zda není poškozená pojistka4. Zkontrolujte, zda je tlačítko ON/OFF v poloze ON.5. Zkontrolujte, zda je nastaven čas.
Zařízení je napájeno, ale nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda jsou k zařízení připojeny kabely.2. Zkontrolujte, zda jsou vodiče připojeny k záplatám.3. Zkontrolujte, zda je nastaven vhodný program.4. Zkontrolujte, zda čas není nastaven na 00:005. Zkontrolujte, zda jsou správně seřizeny příslušné potenciometry.

Pokud zařízení stále nefunguje nebo nefunguje správně, zašlete jej prosím do servisního střediska na adresu ACTIV


www.activeshop.pl



VÁŠ DISTRIBUTOR